ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП



УРАЛЕЦ Н

ТУ 32.50.50-943-05795731-2020

Маска медицинская одноразовая УРАЛЕЦ Н



Назначение

Маска Уралец Н, закрывающая носовую и ротовую полость, предназначена для предупреждения внешнего инфицирования здорового человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

Применение

Маска Уралец Н применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях.
Продолжительность использования маски – не более 8 часов.


Состав

Маска Уралец Н представляет корпус из фильтрующего материала с оголовьем в виде резинового шнура. Маска имеет вертикальное сложение, упаковывается в индивидуальный пакет вместе с инструкцией по применению.

Эксплуатационные свойства

- Универсальный размер, одноразовое применение;
- Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- Плотное прилегание маски к лицу увеличивает ее эффективность;
- Складывающаяся конструкция обеспечивает удобство при хранении и транспортировании;
- Использование новой маски должно сопровождаться процедурой дезинфекции рук;
- После использования маска утилизируется.

Подготовка маски к работе

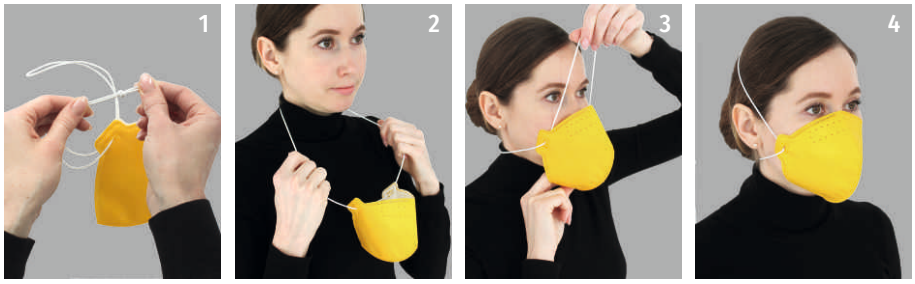

1. Завяжите концы резинового шнура оголовья.
2. Наденьте оголовье на шею.
3. Начиная с подбородка наденьте маску на лицо, расположите оставшуюся часть оголовья на теменной части головы.
4. Маска готова к применению. Правильно надетая маска должна плотно прилегать к лицу, но не оказывать давления.

Технические характеристики маски медицинской Уралец Н

Наименование показателя	Значение показателя
Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе и выдохе при объемном расходе 30 дм³/мин, Па, не более	70
Коэффициент проницаемости по стандартному масляному туману, %, не более	3,0
Масса, г, не более	9

Гарантийный срок хранения

3 года в упаковке организации-изготовителя с момента изготовления.

Разрешающие документы к использованию

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9848 допускает медицинские маски одноразовые по ТУ 32.50.50-943-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации.

Производитель

АО «Сорбент» г. Пермь

сорбент

АО «Сорбент»
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

8 800 70-70-076
(по России звонок бесплатный)

эл. почта: siz.sorbent@zelinskygroup.com
www.protivogaz.ru
www.zelinskygroup.com